




Per saperne di più
 To know more

两种雾化模式：
 实时需要和连续输出



创新的运行指示灯设计

- 仪器运行
- ☾ 治疗结束
- 低电量

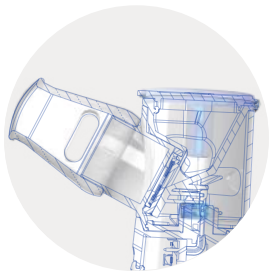

意大利设计与制造



舒适的软触配件：
 成人面罩与儿童面罩。

LightNeb

便携、静音的高效雾化器



经验证，可以雾化倍
 氯米松和布地奈德悬
 混液等吸入药物*



La terapia
 dell'apparato
 respiratorio
 呼吸治疗

50

超过50年的雾化吸入设备制
 造历史，成就了来自意大利
 的卓越品质

www.flaem.it



LightNeb

采用VMT振动筛网雾化技术

* 吸入药物测试是在一个独立的大学试验室进行的



仪器参数

电源	2.4 - 3VDC - 1.5W 2 x AA 电池, 碱性或可充电式电池	
最大装药量	10ml	
换能器频率	108 KHz	
噪音(1米处)	大约40 dBA	
仪器尺寸	5.0 (长) x 6.2 (宽) x 13.7 (高) cm	
仪器重量	115g - 4.05 oz	
收纳袋尺寸	19.0 (长) x 15.0 (宽) cm	
全部重量 (包括配件)	230 g - 8.11 oz	
LED	蓝色: 运行 红色: 低电量	
自动关闭	结束后5分钟	
认证	符合欧盟 93/42/EEC 医疗器械指令及后续修订。	 
	符合欧盟标准EN 10993-1 "医疗器械生物学评价" 和欧盟 93/42/EEC指令: 医疗器械不含邻苯二甲酸酯的要求。 符合(CE) 第1907/2006 法规。	

雾化技术参数

输出率 ml/min	≥ 0.30 (1)
中位空气动力学直径MMAD	3.7 - 4.6 μm (2)
小于5微米的可吸入率(FPF)	大约65 % (2)

- 根据Flaem内部程序第129-P07.5项对雾化速率进行了测试, 测试条件为23°C, 测试溶液为 0.9%氯化钠注射液。雾化输出率也可能会随患者的吸入能力不同而产生变化。
- 意大利莱茵TUV公司与意大利帕尔玛大学合作, 根据欧盟有关呼吸治疗设备标准: EN13544-1: 2007+A1对雾化粒子进行了测定。进一步更多细节可根据要求提供。



配件 / Accessories

软触硅胶口含器	
软触成人面罩	
软触儿童面罩	
内含2节AA碱性电池	
方便的收储袋	
筛网保护帽	

LightNeb

Codice / Code	MF32E00



 Made in Italy